



COMPRESSOR NEBULIZER



CND-501S

SAMSUNG AMERICA, INC.

105 CHALLENGER ROAD 6th FLOOR
RIDGEFIELD PARK, NJ 07660

Printed in China

Toll Free Customer Service

1.800.261.0130

www.SAMsungHealthyLiving.com

SAMSUNG

SAMSUNG AMERICA

Your Healthy Living® Compressor Nebulizer by Samsung America is intended for use in the treatment of asthma, COPD and other respiratory ailments in which aerosolized medication is required during therapy. Please consult with your physician and/or pharmacist to determine if your prescription medication is approved for use with this Nebulizer. This Nebulizer is intended for single patient use.

Federal United States law restricts this device to sale by, or on the order of a licensed physician.



**Instruction
Manual**

Available in English and Spanish

Contents

Please read instruction manual carefully before operating.

Introduction	2
Product Identification	2
Important Safeguards	3
Operation of the Unit	4
Assembling your Nebulizer	
Operating your Nebulizer	
Important Tips	
After Every Use	
Cleaning and Maintenance	6
Cleaning Procedures	
Air Filter Replacement	
Troubleshooting	7
Specifications	8
Accessories	
Warranty	9
Spanish Version	11

For your future reference -

Date of Purchase: _____

Serial Number: _____

Attach your receipt here:

Introduction




Thank you for choosing the Healthy Living® Compressor Nebulizer by Samsung America. With proper care and use, it will provide you with many years of reliable treatment.

This product is developed for the successful treatment of asthma, COPD, allergies and other respiratory ailments in which aerosolized medication is required. It creates a stream of air that travels through a clear tube to the nebulizer. When air enters the nebulizer, it will convert the prescribed medication into aerosol mist for easy inhalation. Treatments are delivered quickly, safely and conveniently making this unit ideal for all ages.

This Nebulizer should be used under the supervision of a licensed physician and/or a respiratory therapist. We encourage you to thoroughly read this instruction manual to learn about the features of this product. Any use of this product other than its intended use should always be avoided.

Product Identification

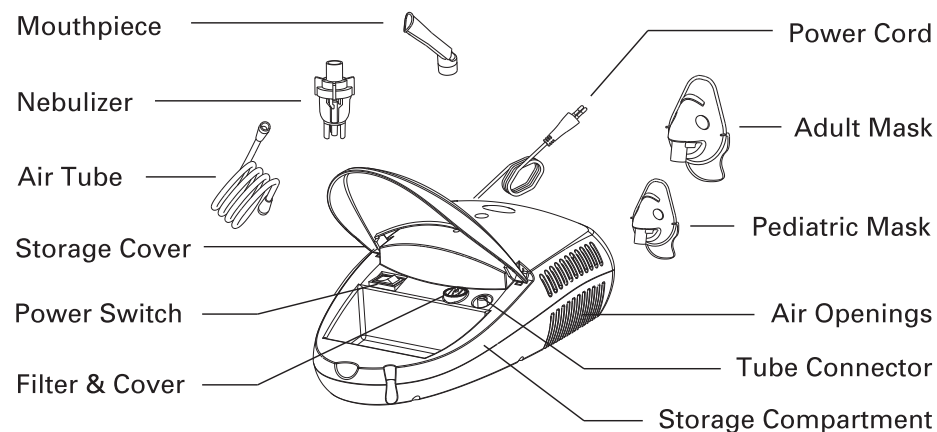

Contents: Instructional DVD, Storage Case, Warranty Card

Important Safeguards

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

Failure to read and observe all precautions could result in personal injury or equipment damage.

PRECAUTIONS:

To avoid electrical shock:

- Keep the unit away from water.
- Do not immerse the power cord or the unit into water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not reach for a unit that has fallen into water – immediately unplug the unit.
- Always unplug the unit immediately after using.

OPERATING CAUTIONS:

- Adult supervision is highly recommended when unit is used by children.
- Never operate the unit if it has any damaged parts (including power cord or plug), if it has been dropped or submersed in water. Promptly send it to a service center for examination and repair.
- The unit should not be used where flammable gas, oxygen or aerosol spray products are being used.
- Do not tilt or shake the unit when in use.
- Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning, filling and after each use.
- Do not use other attachments unless recommended by manufacturer.

STORAGE CAUTIONS:

- Do not store the unit under direct sunlight, high temperature or humidity.
- Keep the unit out of reach of small children.
- Always keep unit unplugged when not in use.

CLEANING CAUTIONS:

- Before each use, check the air filter, Nebulizer, mouthpiece, and any other optional components.
- Dirty or worn parts should be replaced.
- Do not immerse the unit in water. It may damage the unit.
- Before cleaning, disconnect the unit from the electrical outlet.
- After each use, clean all necessary parts as instructed in this manual.

TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY:

1. Connect this unit to an appropriate voltage outlet for your model.
2. Do not run the unit unattended.
3. If any abnormality occurs, discontinue use immediately until the unit has been examined and repaired.
4. Never block the air openings of the main unit or place it where the air openings may be obstructed.
5. Always consult with your physician to determine if your prescription medication is approved for use with this compressor nebulizer.

PLEASE SAVE INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Operation of the Unit






Follow the cleaning instructions in this manual under “Cleaning & Maintenance” prior to using your nebulizer for the first time or after it has been stored for an extended period of time.

Remember: Always unplug the Compressor and make sure the POWER switch is turned to the “off” position before cleaning, assembling and before or after each use.

Assembling your Nebulizer


- 1) Place the Compressor on a flat, stable surface within reach, with the handle facing towards you.
- 2) Open the storage compartment by lifting the lid. Remove the contents (Nebulizer, mouthpiece and air tube).
- 3) Gently twist and pull straight up on the lid of the Nebulizer to separate into two parts (medicine cup and cover).
- 4) Make sure that the purple jet is properly installed inside the medicine cup. (The stem inside the medicine cup inserts into the tube of the purple jet)
- 5) Add the prescribed amount of medicine to the medicine cup.
- 6) Reassemble the Nebulizer by carefully twisting the medicine cup and cover together. Make sure that the two parts fit securely.

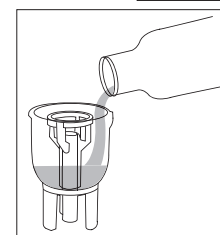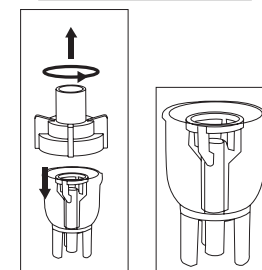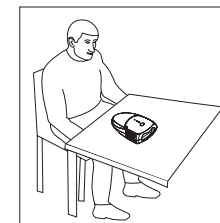

Operating your Nebulizer

Note: The Nebulizer is operable at up to a 45° angle.

- 1) Attach one end of the air tube connector to the air stem.

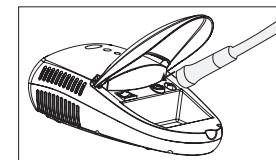


2) Carefully attach the opposite end of the air tube connector to the stem at the base of the Nebulizer.

3) Attach the angled mouthpiece or mask to the top of the Nebulizer.

If using an optional tee adapter set:

- a) Attach the tee adaptor to the top of the Nebulizer.
- b) Connect one end of the tee adapter to the straight mouthpiece and the other to the extension tube.

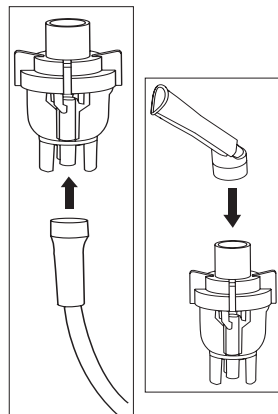


Note: The tee adapter is not needed when using a mask.

4) Check that the POWER switch is in the “off” position. Plug the power cord into a main outlet.

5) Press the POWER switch to the “on” position.

6) Start your treatment according to your physician’s or therapist’s instructions.

Note: The crescent-shaped groove on the side of the compressor can be used to support the nebulizer during treatments.

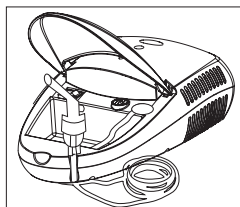

7) Once the treatment is complete, press the POWER switch to the “off” position and unplug the power cord from the outlet.

IMPORTANT TIPS!

The Compressor will automatically shut off if it becomes overheated. If/when this happens, immediately:

- 1) Press the POWER switch to the “off” position.
- 2) Unplug the power cord from the outlet.
- 3) Allow the motor to cool for 30 minutes.

Before restarting the unit, make sure that the air vents are not obstructed.

After Every Use

- 1) Unplug the unit from the power source.
- 2) Allow the unit to completely cool.
- 3) Carefully detach the air tubing from the Nebulizer and pour out any remaining medication.
- 4) Follow the cleaning procedures provided in this manual.

Cleaning and Maintenance




Cleaning Procedures

Please consult with your physician or therapist prior to cleaning regarding the use of commercial disinfectants and appropriate cleaning methods.

Cleaning Technique

(Performed after each treatment):

- 1) Make sure that the POWER switch has been turned to the “off” position and the unit has been disconnected from the power source.
- 2) Disconnect the air tube from the base of the Nebulizer.
- 3) Gently twist and pull up on the cover of the Nebulizer to open and separate.
- 4) Wash all parts of the Nebulizer, the mouthpiece, and other optional components in warm water with a mild detergent.
- 5) Rinse the Nebulizer and components with hot tap water.
- 6) Allow all parts to completely air dry on a clean paper towel.

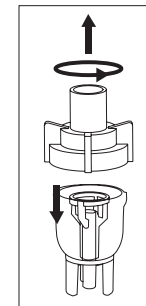

Note: The air tube does not have to be washed as only filtered air passes through it. Keep the outer surface of the air tube dust-free by wiping regularly.

Disinfecting Technique

(Performed after the last treatment of the day or before first time use):

- 1) Follow steps 1-3 under “Cleaning Technique”.
- 2) Submerge the Nebulizer parts in a clean container or bowl that contains a vinegar/distilled water solution of one part white vinegar to three parts distilled water. Let the parts soak for 30 minutes.
- 3) Follow steps 5-6 under “Cleaning Technique”. Do not towel dry Nebulizer parts or reuse disinfecting solution as this could cause contamination.

Note: For the Nebulizer only, clean in the dishwasher using the top shelf. Do not place any Nebulizer parts in the dishwasher. Doing so may cause damage.

Cleaning the Compressor


Wipe the compressor daily using a soft, slightly water-moistened cloth.

Note: Do not place Compressor in dishwasher. Any other form of cleaning or cleaning agents may damage the finish on the unit.

Air Filter Replacement

It is important to change the air filter approximately every 30 days or when the air filter turns grey.

- 1) Remove the air filter cover by gently pulling forward.
- 2) Discard the gray air filter.
- 3) Replace with a new clean air filter.
- 4) Securely reattach the air filter cover to the unit.

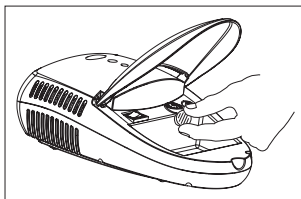

Note: Air filters cannot be cleaned or washed. Do not use cotton or any other materials. Only use Healthy Living® filters. Do not operate without a filter.

Troubleshooting

If any abnormality occurs during use, please check and correct the following:

Condition	Correction
Unit does not operate when POWER switch is pressed.	Check the AC connection to the outlet
No misting or low rate of misting	Check that there is medication in the Nebulizer cup
	Check the Nebulizer for damage
	Check the position of the purple jet inside of Nebulizer
	Make sure that air tube and other components are properly attached
	Check the air filter and replace if necessary
	Check the air tube and replace if necessary

Specifications

**HEALTHY
LIVING®**

Power	120V, 60Hz
Power Consumption	80VA
Medication Capacity	5 ml
Particle Size	0.5 to 10um
MMAD	4um
Sound Level	< 60 dBA
Maximum Capacity of Medication	13 ml (cc)
Average Nebulization Rate	Min 0.2 ml/min
Compressor Pressure Range	30 to 36 psi
Operating Pressure Range	8 to 16 psi
Liter Flow Range	6 ~ 8 lpm
Operating Temperature Range	50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Operating Humidity Range	10 to 95% RH
Storage Temperature Range	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Storage Humidity Range	10 to 95% RH
Dimension (L x W x H)	11.4" x 7.2" x 4.2" (290 x 182x 106mm)
Weight	4.4 lbs (2.0 kg)
Standard Accessories	Nebulizer, Air Tube, Adult & Pediatric Masks, Mouthpiece, Filters (5 pcs)

For purposes of improvement, specifications are subject to change without notice.

Protection against electric shock:

- ☐ Class II Equipment
- ☒ Type BF applied parts: Mouthpiece & Masks

Protection against harmful ingress of water: IPX0 (Ordinary)

Degree of safety in the presence of flammable anesthetics or oxygen: No AP/ APG (Not suitable for use in the presence of flammable anesthetics or oxygen)

Mode of operation: continuous



With respect to electric shock, fire and mechanical hazards only in accordance with UL 1431

Accessories

CNK-510S (Replacement Nebulizer Kit): Nebulizer, and Air Tube

CNF-520S (Replacement Filters): 10 pcs

Warranty



Healthy Living® Compressor Nebulizer Limited 5 Year Warranty

Samsung America, Inc. warrants to the original purchaser of the nebulizer that your Healthy Living® Compressor Nebulizer will be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase, under normal use. This product is for home use only and is not intended for commercial or clinical use. If during this 5 year period, the compressor nebulizer does not work properly because of defect in materials or workmanship, Samsung America, Inc. will replace it with a new Healthy Living® Compressor Nebulizer or equivalent product free of charge (except you must pay the shipping charges set forth below). Purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty performance.

This warranty extends solely to failures due to defects in materials or workmanship occurring during normal use. It does not cover normal wear of the product. This warranty is void if: the product housing has been removed, if the product's label, logo or serial number have been removed or if the product fails to function properly as a result of accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, setup, adjustments, improper maintenance, alteration, maladjustment of controls, modification, power surges, commercial or clinical use of the product, service by anyone other than an authorized service center or acts beyond the manufacturer's or distributor's control.

The warranty and remedy provided herein are exclusive and in lieu of all other express and implied warranties and unless stated herein, any statements or representations made by any other person or entity are void. NEITHER THE MANUFACTURER, DISTRIBUTOR NOR THEIR AFFILIATES SHALL BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCONVENIENCE, INJURY, OR DAMAGE INCLUDING DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE, IMPROPER USE, FAILURE TO HEED ANY WARNING, DISCLAIMER OR INSTRUCTION OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, WHETHER ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. Manufacturer and Distributor assume no responsibility for injuries, damages or penalties incurred or suffered resulting from the use of this product in an improper manner or manner or location other than for that for which it is intended or from failure to heed any warning, disclaimer or instruction.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives your specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Should your product prove defective during this warranty period, please return the product in the original carton prepaid to:

SAMSUNG AMERICA, INC.
c/o Healthcare Division
105 Challenger Road, 6th Floor
Ridgefield Park, NJ 07660
Attn: Customer Service

Include **\$8.95** for return shipping and insurance. (CHECK OR MONEY ORDER ONLY PLEASE, NON-REFUNDABLE).

Include with your nebulizer a letter stating: your name, street address, daytime phone number, detailed description of the problem, a copy of your dated cash register receipt or other proof of purchase.

Sorry, we cannot deliver to P.O. Boxes or outside the U.S.

This warranty applies only to products purchased in the U.S. For products purchased in, but used outside, the U.S., this warranty covers only warranty services within the U.S. (and does not include shipping outside the U.S.).

© 2005 Samsung America, Inc. All rights reserved.

NEBULIZADOR COMPRESO

CND-501S

Su Nebulizador compreso Healthy Living® por Samsung America, está hecho para el uso en el tratamiento del asma, COPD y otros elementos respiratorios en donde se requiere medicación aerolizada durante una terapia. Porfavor consulte con su médico ó farmacista para determinar si la receta médica está aprovada para el uso de este Nebulizador Este Nebulizador está hecho para el uso individual del paciente.

La ley federal de los Estados Unidos restringe que este producto sea vendido sin la orden de un médico licenciado.



**Instruccion
Manual**

Available in English and Spanish

Contenido

Lea las indicaciones apropiadamente antes de operar.

Introducción	2
Identificaciones del producto	2
Cuidados Importantes	3
Operando el compresor de su nebulizador	4
Montar el nebulizador	
Operar el nebulizador	
Consejos importantes	
Después de cada uso	
Limpieza y mantenimiento	6
Procedimientos de limpieza	
Reemplazo de el filtro de aire	
Problemas de funcionamiento	7
Especificaciones	8
Accesorios	
Garantía	9

Para sus referencias futuras -

Día de compra: _____

Número de serie: _____

Peque su recidbo aqui:


Introducción

Gracias por elegir el nebulizador compreso de healthy living hecho por Samsung America. Es un aparato médico compacto diseñado para administrar medicina con receta médica para las vías bronquiales de los pulmones. Con el apropiado cuidado y uso, usted podrá obtener un tratamiento confiable por muchos años.

Este producto se desarrolla para el tratamiento acertado del asma, COPD, alergias, y otras vías respiratorias en donde se requiere medicación aerolizada. Crea una corriente de aire que viaja por el tubo transparente hasta el nebulizador. Cuando el aire entró al nebulizador, convertirá la medicina recetada en un gas del aerosol para una mayor inhalación.

Su nebulizador compresor de Healthy Living debe de ser usado bajo la supervisión de un médico licenciado o de un terapéutica respiratorio. Le animamos a que lea a fondo este manual de instrucciones para que aprenda las características de este producto. Cualquier uso de este producto con excepción de su uso previo debe ser siempre evitado.

Identificaciones del producto

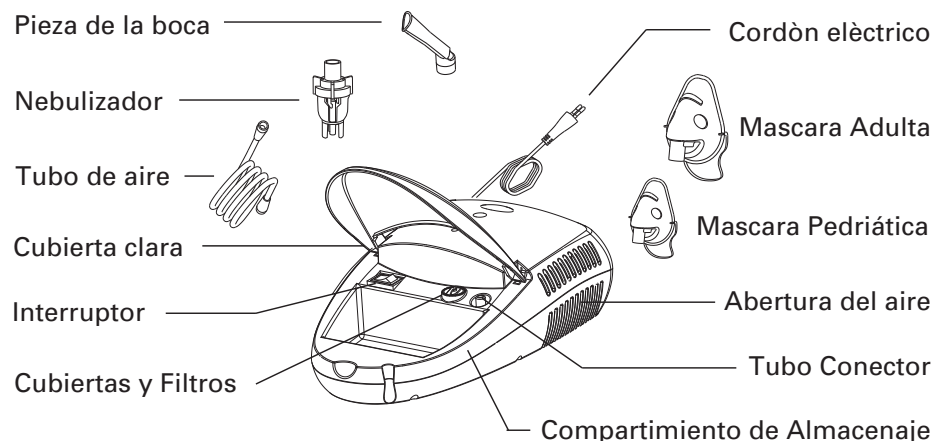

Contenido: Un DVD instruccional, Bolsa de almacenaje y Tarjeta de garantía

Cuidados Importantes



LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

La falta de leer y de observar todas las precauciones podría dar lugar a daños corporales o a daños del equipo.

PRECAUCIONES:

Pare evitar choques eléctricos:

- Mantenga la unidad lejos del agua.
- No sumerja el cordón eléctrico o la unidad en agua u otro líquido.
- No lo use mientras se baña.
- No saque la unidad que se haya caído en el agua, inmediatamente desconecte la unidad de la electricidad.
- Siempre desconecte la unidad inmediatamente después de usarlo.

Precauciones de funcionamiento:

- Se recomienda una alta supervisión adulta cuando la unidad sea usada con niños.
- Jamás utilice la unidad si tiene un cable eléctrico o enchufe dañado, si se le ha caído a alguien o si ha sido de cualquier modo sumergida en agua y si no funciona apropiadamente. Devuélvala a un centro de reparaciones para su reparación.
- La unidad no debe ser usada en lugares donde se usan gases inflamables, oxígeno o productos de aerosol.
- No incline o sacuda la unidad cuando este en uso.
- Desconecte la unidad del tomacorriente eléctrico antes de limpiarla, llenarla y después de cada uso.
- No utilice otras partes agregadas a menos que el fabricante lo recomiende.

Precauciones de almacenamiento:

- No almacene la unidad a la luz directa del sol ni en lugares con altas temperaturas o alta humedad.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños pequeños.
- Siempre debe mantener la unidad desenchufada cuando no está en uso.

Precauciones de limpieza:

- Antes de cada uso, pruebe el filtro de aire, nebulizador, pieza de boca y cualquier otra parte opcional del componente.
- Partes sucias o en mal estado deben de ser reemplazadas.
- No sumerja la unidad en agua. Esto puede dañar la unidad.
- Desconecte la unidad del tomacorriente eléctrico antes de limpiarla.
- Limpie todas las partes necesarias después de cada uso según se indica en este manual.

Para reducir el riesgo de daños corporales:

1. Conecte la unidad a un enchufe con el voltaje apropiado de su modelo.
2. No deje la unidad encendida sin estar presente.
3. Si alguna abormalidad ocurriese, descontinúe su uso inmediatamente hasta que la unidad haya sido examinada y reparada.
4. Nunca bloquee las abertura del aire de la unidad principal o lo ponga donde las aberturas del aire pueden ser obstruidas.
5. Consulte siempre con su médico para determinarse si su receta médica es aprobada para el uso con el compresor de su nebulizador.



Como Operar la Unidad

Antes de usarlo por primera vez o después de haber estado guardado un período largo de tiempo, el nebulizador compresor debe ser limpiado minuciosamente utilizando los "procedimientos de limpieza" del manual.

Recuerde: Siempre desconecte el compresor y asegurese que el interruptor para encender este en la posición de apagado "off" antes de limpiar, ensamblar y después de cada uso.

Como Ensamblar Su Nebulizador


- 1) Coloque su nebulizador compresor sobre una superficie plana y estable. Asegúrese de poder alcanzar los controles con facilidad cuando esté sentado.
- 2) Abra el compartimiento de almacenaje simplemente levantando la cubierta. Remueva el contenido (nebulizador, pieza de la boca y tubo de aire).
- 3) Gentilmente gire y jale hacia arriba de la cubierta del nebulizador para separar en dos partes (copa de la medicina y cubierta).
- 4) Asegurese de que el reactor morado esté apropiadamente instalado dentro de la copa de la medicina. (El vapor dentro de la copa de la medicina se introduce entre el tubo del reactor morado)
- 5) Agregue la cantidad de medicamento prescrita en la copa de medicina.
- 6) Vuelva a Montar el nebulizador cuidadosamente al girar la copa de la medicina y cubierta juntas. Asegurese que las dos partes encajen seguramente.

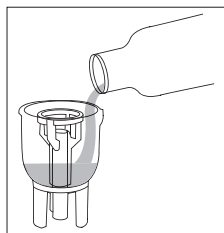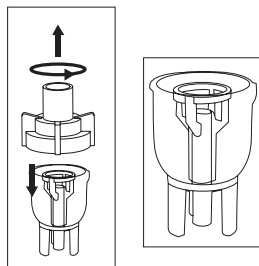

Operando su nebulizador


Nota: Su nebulizador es operado hasta un ángulo de 45°.

- 1) Sujete una de las puntas del tubo de aire al tubo conector del aire.

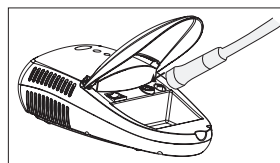


- 2) Cuidadosamente agregue la punta opuesta del conector del tubo de aire al vaporizador en la base del nebulizador.
- 3) Agregue la pieza de boca angulada o la máscara opcional arriba del nebulizador. Si va a usar el sistema opcional del adaptador te
 - a) Una el adaptador te arriba del nebulizador.
 - b) Conecte una de las puntas del adaptador te a la pieza de la boca y a la otra a la extensión de los tubos.

**HEALTHY
LIVING®**

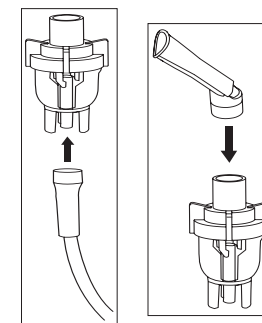

Nota: El adaptador no es necesario cuando se usa con la máscara.

- 4) Compruebe que el interruptor esté en la posición de apagado. Enchufe el cordón eléctrico en un toma corriente principal.
- 5) Presione el interruptor a la posición de encendido.
- 6) Comience su tratamiento de acuerdo a las instrucciones de su doctor o terapeuta.

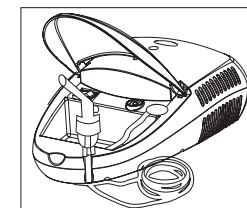

Nota: La forma-surco creciente (media luna) al lado del compresor puede ser usado para aguantar el nebulizador durante el tratamiento.

- 7) Una vez que el tratamiento este completado, presione el interruptor a la posición de apagado y desenchufé el cordón del toma corrientes.

PUNTOS IMPORTANTES!

El compresor se apagará automáticamente si se recalienta. Si/Cuando esto sucede, inmediatamente:

- 1) Presione el interruptor a la posición de apagado.
- 2) Desenchufé el cordón eléctrico de el toma corrientes.
- 3) Deje que el motor se enfrie por 30 minutos.

Antes de usar la unidad de nuevo, asegurese que las salidas de aire no esten osbtruidas.

Despues de Cada Uso

- 1) Desenchufé la unidad de la fuente de energía.
- 2) Deje que la unidad se enfrie compeltamente.
- 3) Cuidadosamente desprenda el tubo de aire del nebulizador y saque cualquier residuo de medicina.
- 4) Siga las procedimientos de limpieza dados en este manual.


Técnicas de Limpieza

Procedimiento de limpieza

Por favor siga instrucciones de su médico o terapeuta referente a como limpiar con desinfectantes comerciales y cuales son los metodos apropiados de limpieza.

Técnicas de enjuague (Hagalo después de cada tratamiento):

- 1) Asegurese que el interruptor esté en posición de apagado "off" y que la unidad haya sido desconectada de el toma corriente.
- 2) Desconecte el tubo de aire de la base del nebulizador.
- 3) Gentilmente gire la cubierta del nebulizador para abrir y separar.
- 4) Lave todas las partes del nebulizador, la pieza de la boca y otros componentes opcionales en agua tibia con una ligera cantidad de detergente.
- 5) Seque con toallas limpias o deje que se seque completamente al aire libre.
- 6) Deje que todas las partes se sequen completamente al aire sobre una toalla de papel limpia.

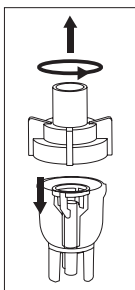

Nota: No hay necesidad de lavar el tubo de aire pues solo aire filtrado pasa por el. Mantenga la superficie del tubo de aire libre de polvo limpiandolo por encima regularmente.

Técnicas de Desinfectar

(Realize después de el último tratamiento del día o antes de usarlo por primera vez):

- 1) Siga los pasos 1-3 de "Técnicas de Limpieza".
- 2) Sumerja las partes del nebulizador en un tazón limpio que contenga vinagre/solución de agua destilada de una parte de vinagre blanco a tres partes de agua destilada. Deje que las partes se empapen por 30 minutos.
- 3) Siga los pasos 5-6 de Técnicas de Limpieza. No seque con toalla las partes de su nebulizador o reúse la solución desinfectante puesto que esto puede causar contaminación.

Nota: Unicamente para el nebulizador, use en la parte superior de lavadora de platos. No ponga ninguna otra parte del nebulizador. Esto puede causar daños.

Limpianodo el Compresor


Limpie frotando una vez al día con un trapo húmedo.

Nota: No ponga el compresor en la maquina de lavar platos. Otro tipo de limpieza o detergentes puede dañar el acabado de la unidad.

Cambio de filtro de Aire

Es importante cambiar el filtro de aire aproximadamente cada 30 dias o cuando el filtro de aire se haga grís.

- 1) Remueva la cubierta del filtro de aire jalandola gentilmente hacia arriba.
- 2) Deshagase del filtro de aire grís.
- 3) Reemplace con un filtro de aire nuevo.
- 4) Reconecte seguramente la cubierta del filtro de aire a la unidad.

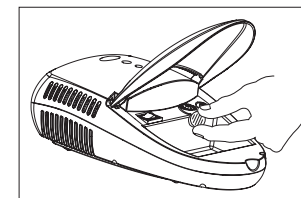

Nota: Los filtros de aire no pueden ser limpiados o lavados. No use algodón u otro tipo de materiales. Solo use los filtros de Healthy Living. No operé sín usar el filtro.

Solución de Problema

Si alguna abonormalidad sucediese durante su uso, porfavor inspeccioné y corrija lo siguiente:

Condición	Corrección
Si la unidad no opera cuando el Interruptor sea accionado.	Inspeccione la conexión AC en el toma corriente.
No brumosidad o bajo nivel de Brumosidad.	Aseguresé que hay medicamento en la copa de el nebulizador.
	Inspeccione el nebulizador por daños.
	Observe la posición del eje morado dentro del Nebulizador.
	Aseguresé que el tubo de aire y otros componentes esté apropiadamente instalados.
	Inspeccione el filtro de aire y reemplacelo si es necesario.
	Inspeccioné el tubo de aire y reemplace si és necesario.

Especificaciones

Energía	120V, 60Hz
Consumo de Energía	80VA
Capacidad de medicina	5 ml
Tamaño de partícula	0.5 to 10um
MMAD	4um
Nivel de Sonido	< 60 dBA
Capacidad Máxima de medicación	13ml (cc)
Nivel Promedio de el Nebulizador	Min 0.2 ml/min
Promedio del compresor	30 to 36 psi
Operando el promedio de la presión	8 to 16 psi
Gama Del Flujo Del Litro	6 ~ 8 lpm
Operando el promedio de La temperatura	50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Operando el promedio de La humedad	10 to 95% RH
Guardando el promedio de La temperatura	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Guardando el promedio de La humedad	10 to 95% RH
Dimensión (L x W x H)	11.4" x 7.2" x 4.2" (290 x 182x 106mm)
Peso	4.4 lbs (2.0 kg)
Accesorios estándares	Nebulizador, Tubo de Aire, Pieza de la Boca, Filtro (5pcs), Mascara para adultos e infantes.

Por propósitos de mejoras, las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.

Protección en contra de choques eléctricos:



Equipo clase II



Partes aplicables tipo BF: Pieza de boca, inhalador de bebe y mascara

Protección en contra de el peligro de el ingreso de agua IPXo (ordinario)

Grado de seguridad en la presencia de anestésicos o del oxígeno inflamable:

No AP/ APG

Mode of operation: continuous



Por respeto a descargas electricas, incendio o daños mecanicos solo en acuerdo con UL 1431

Accesorios

CNK-510S (Equipo de remplazo para Nebulizadores): Nebulizador, pieza de boca, tubo de aire.

CNF-520S (Remplazos de filtros) : 10 pcs

Garantía de Fabrica limitada de 5 años



Samsung America, Inc. le da garantía al comprador original del nebulizador de Vida Saludable. El nebulizador compreso será reparado o sustituido en caso de defectos materiales o de mano de obra sin gasto alguno por el periodo de tiempo de 5 años desde la fecha original de compra. Esta garantía solo es válida para el comprador original. Necesitará la factura de compra u otra prueba de la fecha de compra original antes de utilizar la garantía.

Esta garantía es válida solo contra fallos debidos a defectos materiales o de mano de obra que ocurran en un uso normal. No cubre su uso diario y continuado. Esta garantía quedará anulada si: Se ha desmontado la cubierta del producto, si se ha quitado la etiqueta del fabricante, el logotipo o el número de serie o si el producto no funciona bien por accidente, mal uso, abuso, negligencia, mal trato, mala colocación, pilas defectuosas, una mala instalación, configuración, ajustes, mal mantenimiento, alteración, mal ajuste de los controles, modificación, cambios de tensión eléctrica, uso comercial del producto, intento de arreglo por un servicio no autorizado o actos fuera del control del fabricante.

La garantía y el remedio incluidos aquí son exclusivos y están ligados a otras garantías expresas e implícitas y a menos que se especifique, queda anulada cualquier afirmación o representación realizada por otra persona o entidad. NI EL FABRICANTE, EL DISTRIBUIDOR NI SUS AFILIADOS SE HARÁN RESPONSABLES POR LA PERDIDA, MOLESTIA, LESIÓN O Daño, INCLUYENDO Daños DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN DEL USO, USO IMPROPIO, FALTA DE ATENCIÓN A UN AVISO, UNA NEGATIVA O UNA INSTRUCCIÓN O POR NO PODER UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

POR INFRINGIR CUALQUIER PARTE DE ESTA GARANTÍA O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO LEGAL. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS DE MERCANTIBILIDAD, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO DE GARANTÍA APPLICABLE ESTABLECIDO MÁS ARRIBA. El fabricante y el distribuidor no asumen responsabilidad alguna por lesiones, daños o penas provocadas o sufridas como resultado del uso de este producto de manera no apropiada o de manera o destinación distinta para la que fue diseñado o por no seguir los avisos, negaciones o instrucciones.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales o las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que puede que, en su caso las exclusiones o limitaciones anteriores no se le apliquen a usted. Esta garantía le ofrece sus

derechos legales específicos y tal vez posea otros derechos que pueden variar de esta forma en estado.

Si su producto presenta defectos durante su periodo de garantía, devuélvalo en su embalaje original franqueado a:

SAMSUNG AMERICA, INC.
105 Challenger Road, 6th Floor
Ridgefield Park, NJ 07660

Incluya **\$8.95** dólares (No Reembolsables) para el envío de vuelta y el seguro. (POR FAVOR ESCRIBA SU DIRECCIÓN EXACTA, NO SE ACEPTAN CAJAS POSTALES)

Incluya con su medidor una carta que contenga: su nombre, dirección, número de teléfono actual, una descripción detallada del problema y una copia de su factura de compra con fecha de pago u otra prueba de compra.